



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Массажер Massage Gun EM03 24V, 1500 MAh



## СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕИ.....	6
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	8
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .....	8
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ .....	8

Рабочее напряжение: 24 В

Выходная мощность: 20 Вт



1. Кнопка снятия аккумулятора

2. Индикатор питания аккумулятора

3. Переключатель аккумулятора

4. Порт зарядки


5. 6 видов массажных головок

6. Индикатор питания: когда цифровой дисплей на правой стороне ЖК-дисплея показывает 99, это означает, что Питание полностью заполнено, число постепенно меняется на 80, 60, 40, это означает, что питание падает, когда число на дисплее равно 20, батарея разряжается и ее необходимо зарядить.

7. Число в левой части экрана обозначает ходовую часть машины. Для частоты 01 импульса передачи 1200 об / мин, если вы добавите одну передачу, частота увеличится на 100 об / мин, максимальный уклон - 20, а максимальная скорость - 3200 об / мин.

8. Переключатель увеличения или уменьшения: кнопка +, - в нижней части экрана является переключателем увеличения и уменьшения, после нажатия кнопки, передачи плюс один, после нажатия кнопки, переключения передач минус один, если вы продолжаете нажимать + или кнопку - в течение пяти секунд, пистолет лицевой панели остановится. нажмите кнопку + снова и пистолет фации перезапускается.

9. Батарея: (Напряжение 24 В)

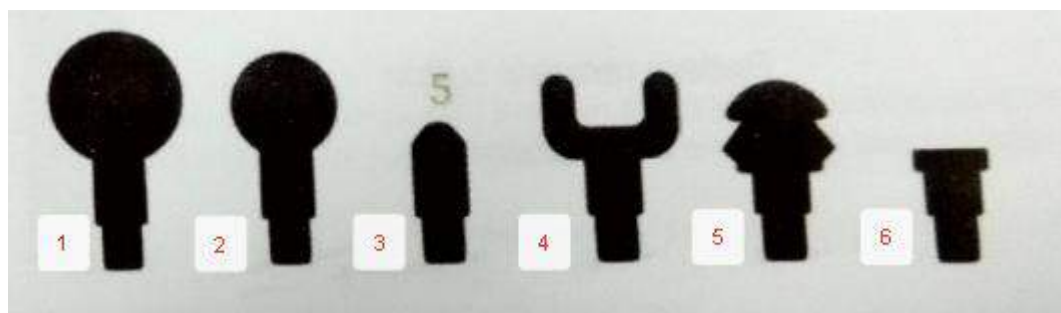


1. Большая шариковая головка (Большая группа мышц)
2. Маленькая шариковая головка (Подходит для позвоночника)
3. Спиральная головка (Подходит для разных частей тела)
4. Разбитая голова (Подходит для позвоночника)
5. Головка воздушной пробки (Подходит для костей всего тела)
6. Плоская голова (Подходит для всех частей тела)

Установите: Вставьте массажную головку в машину и поверните на 360 ° против часовой стрелки.



Установите: обрежьте массажную головку на 360 ° против часовой стрелки, затем вытяните ее из машины.

Внимание: при установке массажной головки, пожалуйста, сначала вставьте массажную головку в машину, затем поверните на 360 по часовой стрелке до упора. Если вы хотите вынуть массажную головку, пожалуйста, поверните ее на 360 ° против часовой стрелки, затем вытащите ее из машины.

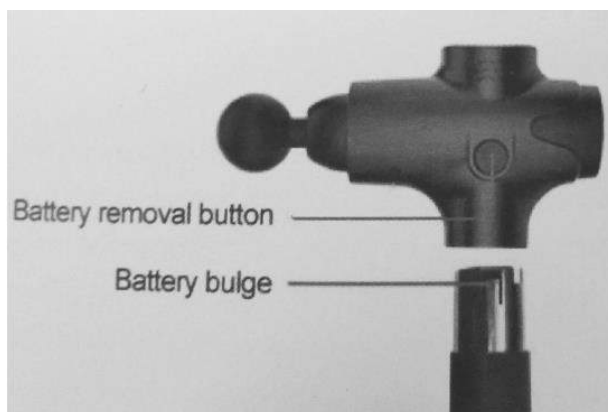

1. Кнопка удаления аккумулятора

2. Выпуклость батареи

При установке батареи, пожалуйста, совместите выпуклость батареи с кнопкой извлечения, затем вставьте батарею.

Если вы хотите извлечь батарею, пожалуйста, удерживайте ручку батареи, нажмите кнопку извлечения батареи, затем вытащите ее.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Для установки батареи, пожалуйста, совместите выпуклость батареи с кнопкой извлечения, затем вставьте батарейку. Для снятия.

2. При установке переключателя аккумулятора в положение «ON» загорается индикатор питания аккумулятора. Загорается экран. Удерживайте батарейный блок и нажмите кнопку извлечения аккумулятора, затем вытяните его. два числа в правой части экрана обозначают заряд батареи. 99/80/60/40/20 указывает на то, что заряд полностью или низок.

3. В зависимости от потребностей различных частей массажа, выберите подходящую массажную головку, чтобы вставить ее в круглое отверстие перед фазовым пистолетом.

4. Нажмите кнопку + в нижней части экрана, и пистолет-распылитель начнет работать. Цифра в левом верхнем углу экрана показывает положение передачи, каждая кнопка +, увеличивайте положение передачи на одну передачу, скорость 01 равна 1200 об / мин, каждая дополнительная передача увеличивает скорость на 100 об / мин, максимальная передача составляет 20 передач, а скорость составляет 3200 об / мин. После того, как вы нажмете кнопку -, машина минус одна передача. В любом положении передачи (01-20), нажмите и удерживайте кнопку + или - в течение пяти секунд, пистолет-распылитель перестанет работать.

5. После завершения массажа выключите переключатель аккумулятора, чтобы в положение «ВЫКЛ.» и экран выключится.

6. Для защиты машины пистолет-распылитель автоматически останавливается, если он работает непрерывно более 10 минут, или если сила нажатия слишком велика, пожалуйста, включите его. еще раз, если вам нужно продолжать использовать его.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕИ**

Когда батарея полностью разряжена, для ее полной зарядки требуется 1,5-2 часа. Время работы батареи определяется положением шестерни.

Индикатор включения батареи загорается, когда батарея заряжается, он меняется с красного на зеленый ошейник, для вашей безопасности, вы никогда не должны настраиваться на машине, когда батарея заряжается.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для снижения риска поражения электрическим током, травмы, этот продукт должен использоваться в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

- 1 Разрешено использовать только взрослым.
- 2 Это устройство не может производить непосредственный массаж поверхности кожи во избежание травмирования кожи; после массажа сухой и чистой одежды или чистого и сухого полотенца область массажа должна быть червячной. Вам нужно аккуратно нажать и переместить время массажа эта же часть не может превышать 60-х годов.
- 3 Используйте высокую скорость и высокое давление только для мягких тканей, не причиняя боли и дискомфорта, не используйте высокую скорость и высокое давление на голову и любые костные части тела.
- 4 В соответствии с потребностями массажа различных частей, пожалуйста, выберите правильную массажную головку.
- 5 Частое использование высокоскоростного высокого давления для надавливания на одну и ту же деталь вызовет ссадины, если вы чувствуете боль и неудобство, немедленно прекратите использование.
- 6 Пальцами, волосами или любой частью тела, пожалуйста, держитесь подальше от телескопической штанги устройства и отверстия для отвода тепла двигателя, чтобы избежать травмирования.
7. Не кладите ничего в радиатор двигателя.
8. Оборудование не должно попадать в воду, никогда не допускайте попадания воды из охлаждающего отверстия двигателя в оборудование.
9. Не выбрасывайте и не используйте это устройство не по назначению.
10. Для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство.
11. Тщательно проверяйте устройство и аккумулятор перед каждым использованием.
12. Не производите частную модификацию оборудования.
13. Не запускайте устройство и не заряжайте его в автоматическом режиме.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Протрите поверхность устройства слегка влажным полотенцем и вытрите мягкой тканью.
2. При длительном хранении или путешествии отсоедините устройство от аккумулятора и поместите его в оригинальный футляр устройства.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

1. Не оставайтесь в воде, держите машину подальше от жидкостей и источников тепла, чтобы убедиться, что в охлаждающих отверстиях двигателя нет пыли и мусора.
2. Не удаляйте винты самостоятельно.
3. Выключите устройство после одного часа работы и используйте его после отдыха в течение получаса.
4. Извлеките зарядное устройство из батареи после зарядки и не используйте устройство во время зарядки.
5. Использование данного устройства для поврежденной части тела запрещено без консультации с врачом.

## **ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием этого оборудования, используйте это оборудование правильно в соответствии с инструкциями, наша компания не будет нести ответственность за любой ущерб или убытки, вызванные неправильным использованием этого оборудования, как объяснено. Не используйте это устройство без разрешения вашего врача, если: беременность, диабет и осложнения, невралгия или повреждение сетчатки. Износ космонавта, недавно перенес хирургическое вмешательство, мигрень, выпячивание диска или воспаление позвоночника, недавно ВМС были или есть проблемы со здоровьем. Вам необходимо сначала проконсультироваться с врачом и использовать его с разрешения врача.



Мы изучаем влияние устройства на конкретные медицинские условия, это может привести к тому, что вышеперечисленные симптомы могут быть недостаточно подробными, если вы плохо себя чувствуете, пожалуйста, прекратите использование.

Следуйте советам врача или физиотерапевта.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**